

Гарантийные обязательства

1. На изделие действует гарантия 12 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия действует в случае, если неисправность изделия возникла по вине производителя.
3. Гарантийные обязательства не распространяются при механических повреждениях и при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.

АДАПТЕР ПИТАНИЯ	DC 5В 1.0А
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240В~50/60Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	5Вт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3.7В
РАЗМЕРЫ	140x110x110 мм



Power Mood Массажер для головы и тела

Расслабление кожи головы

askona
PERFORMANCE



Указанное руководство пользователя содержит спецификацию по данному массажеру и инструкцию по использованию. Пожалуйста, изучите инструкцию перед использованием.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочитайте нижеуказанные инструкции перед использованием массажера. Если у Вас диагностированы какие-либо из указанных ниже состояний, рекомендуем перед эксплуатацией устройства обратиться за консультацией к своему врачу.

Если:

- у Вас диагностированы заболевания сердца или установлен кардиостимулятор
- Вы страдаете остеопорозом или диабетом
- имеется злокачественная опухоль
- страдаете неврологическим расстройством или расстройством восприятия
- недавно перенесли операцию на зоне, где планируете делать массаж
- страдаете кожными заболеваниями или аллергическими дерматитами
- страдаете острыми заболеваниями или проходите лечение

Настоятельно рекомендуем перед использованием устройства проконсультироваться с врачом.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина/Устранение
Массажер не запускается	Разряжена батарея/Зарядите батарею перед использованием
Массажер выключился	<ul style="list-style-type: none"> • Разряжена батарея/Зарядите устройство • Массажер выключился после 10-минутного цикла/Включите устройство
Массажер издает небольшой шум	Для устройства нормален небольшой шум работающего механизма

4

Решения для Вашего отдыха и восстановления



POWER EYES
МАССАЖЕР
для глаз



POWER NECK
МАССАЖЕР
для шеи



MUSCLE SHOCK FOOT
EMS-МАССАЖЕР
для ног




MUSCLE SHOCK BODY
EMS-МАССАЖЕР
для тела



STRESS FREE
МАССАЖЕР
для лица



POWER BODY
МАССАЖЕР
для тела

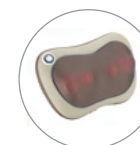

POWER BACK
МАССАЖЕР
для спины



POWER FOOT
МАССАЖЕР
для ног

6

Содержание

Знакомство с прибором.....1	Устранение неисправностей..... 4
Спецификация устройства.....2	Уход за устройством.....5
Устройство предназначено.....2	Транспортировка.....5
Порядок использования.....3	Гарантийные обязательства..... 6
Последовательность зарядки.....3	

Знакомство с прибором

В коробке: массажер, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция по использованию.



1

Порядок использования

Включите устройство, приложите массажные головки к волосистой части головы и расслабьтесь.

1. Один раз коротко нажмите на кнопку для включения. Зажмите кнопку на 3+ секунды, чтобы выключить устройство.
2. Последовательные короткие нажатия переключают скорости и направление вращения. Устройство имеет 2 направления вращения (по и против часовой стрелки) и 2 скорости работы (низкая и высокая).

- Индикатор заряда — после одного включения загорается зеленым
- ± Индикатор скорости — моргает красным при изменении
- Индикатор направления вращения — моргает синим при изменении

Последовательность зарядки

1. Во время зарядки индикатор заряда будет гореть светло-зеленым.
2. По окончании зарядки цвет индикатора изменится на ярко-зеленый.
3. Время полной зарядки составляет около 2х часов.
4. Во время зарядки устройство будет выключено.

3

Спецификация устройства

1. Встроенная литий-ионная батарея.
2. Кнопка управления.
3. Время предустановленной программы массажа — 10 минут.
4. Функция автоматической защиты.
5. Два скоростных режима.
6. Два направления движения.
7. Зарядный кабель micro-USB и адаптер питания.
8. Напряжение — 5В, емкость аккумулятора — 1000mAh.
9. Защита от случайного попадания воды.
10. 3D-массаж головы.

Устройство предназначено для:

1. Работающих за компьютером.
2. Людей с малоподвижным образом жизни.
3. Людей, страдающих от головокружений и головных болей.
4. Страдающих бессонницей.

2

Уход за устройством

1. Устройство защищено от случайного попадания влаги, поэтому массирующие головки можно протирать специальной жидкостью или водой (не погружайте устройство в воду полностью).
2. После протирания используйте мягкую салфетку для вытирания насухо.
3. Не используйте для чистки шершавые, жесткие и острые предметы, бензин или другие агрессивные жидкости.
4. Храните устройство в безопасном, сухом и прохладном месте.
5. Во избежание повреждений или потери цвета не храните устройство при высоких температурах, рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами.

Транспортировка

Устройство оснащено простейшей системой защиты от ударов, и может свободно транспортироваться в самолетах, поездах, автомобилях и кораблях.

5